

INTUITIVE

Strattner



Grampeador da Vinci

SureForm

Com Tecnologia SmartFire

Alcance mais com
seu grampeador.

Mais inteligente

Com um toque no pedal, você ativa a tecnologia SmartFire que mede a compressão do tecido antes e durante o disparo.


A tecnologia SmartFire usa mais de 1000 medidas por segundo para fazer ajustes automáticos ao processo de disparo enquanto os grampos estão sendo formados e o corte está sendo realizado.



Essa avançada tecnologia de disparo é fácil de usar e ajuda a garantir uma linha de grampos mais consistente ao mesmo tempo em que previne danos de uma grande variedade de tecidos com diferentes espessuras.

Maior precisão


Menor tensão no tecido alvo e menor estresse nas anatomias adjacentes durante o posicionamento e o clampeamento.

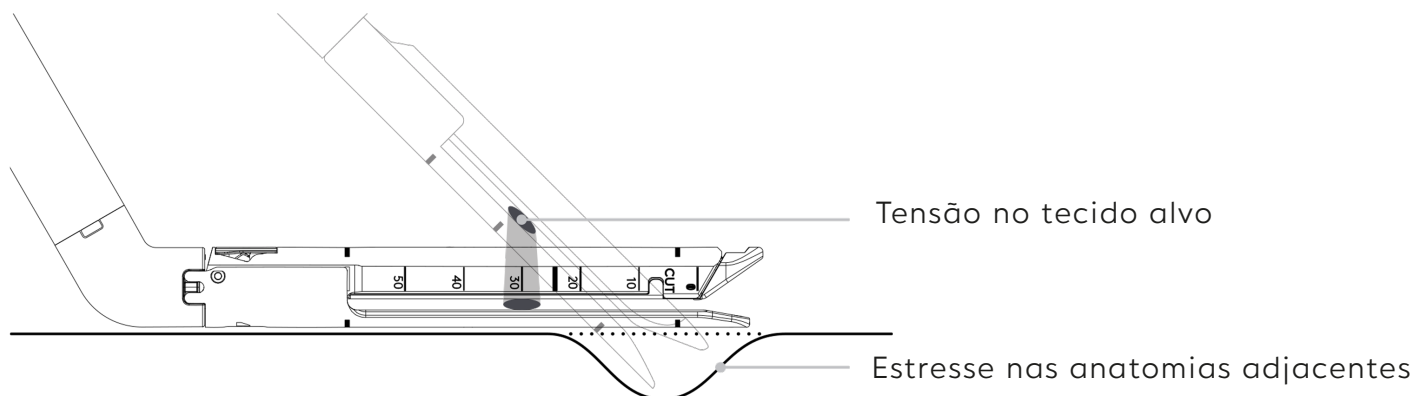

Com uma grande amplitude articular e design centrado na bigorna, o grampeador SureForm pode ser posicionado exatamente no local desejado, minimizando a tensão no tecido alvo e estresse nas anatomias adjacentes.

Maior mobilidade

A angulação de movimento de 120° proporciona a liberdade de mover seu grampeador e de posicioná-lo onde você preferir.

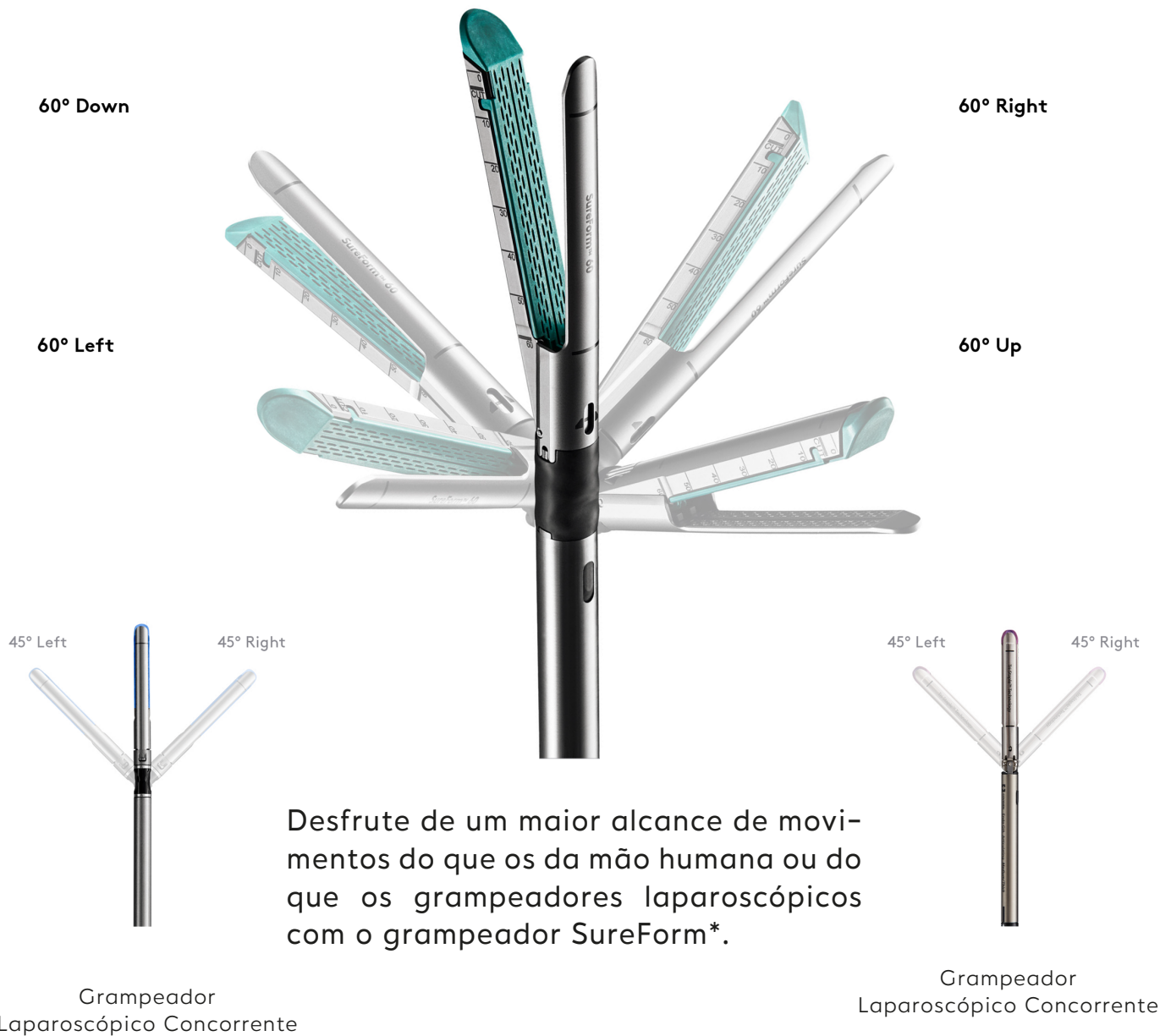

*Comparado ao Endo GIA Ultra com tecnologia Tri-Staple, SIGNIA com tecnologia Tri-Staple 2.0 e Powered Echelon Plus com GST em Março de 2019

SureForm

Maior acesso e autonomia com seu grampeador.

Os grampeadores SureForm estão disponíveis nos tamanhos de 45mm e 60mm de comprimento de linha de grampo. As recargas dos grampeadores SureForm 45mm e 60mm apresentam 6 linhas de grampos e introduzem a recarga preta no portfolio da Vinci pela primeira vez.

SureForm 60



60mm de linha de grampos/55mm de linha de corte
Design centrado na bigorna
Necessita de cânula de 12mm
12 disparos
Uso em um único paciente

SureForm 45



45mm de linha de grampos/40mm de linha de corte
Design centrado na bigorna
Necessita de cânula de 12mm
12 disparos
Uso em um único paciente

SureForm 60 reloads



Recargas Branca, Azul, Verde e Preta
6 linhas de grampos
Nova lâmina a cada recarga

SureForm 45 reloads



Recargas Branca, Azul, Verde e Preta
6 linhas de grampos
Nova lâmina a cada recarga

Informações de compra

Quando você escolhe os grampeadores SureForm, você reduz a incerteza e aumenta a performance de grampeamento como nunca visto antes.



SureForm 45
Grampeador Da Vinci

6 unidades por caixa | 480445
da Vinci X and da Vinci Xi



SureForm 60
Grampeador Da Vinci

6 unidades por caixa | 480460
da Vinci X and da Vinci Xi



SureForm 45

12 unidades por caixa | 48345W



SureForm 60

12 unidades por caixa | 48360W



SureForm 45

12 unidades por caixa | 48345B



SureForm 60

12 unidades por caixa | 48360B



SureForm 45

12 unidades por caixa | 48345G



SureForm 60

12 unidades por caixa | 48360G




SureForm 45

12 unidades por caixa | 48345T



SureForm 60

12 unidades por caixa | 48360T

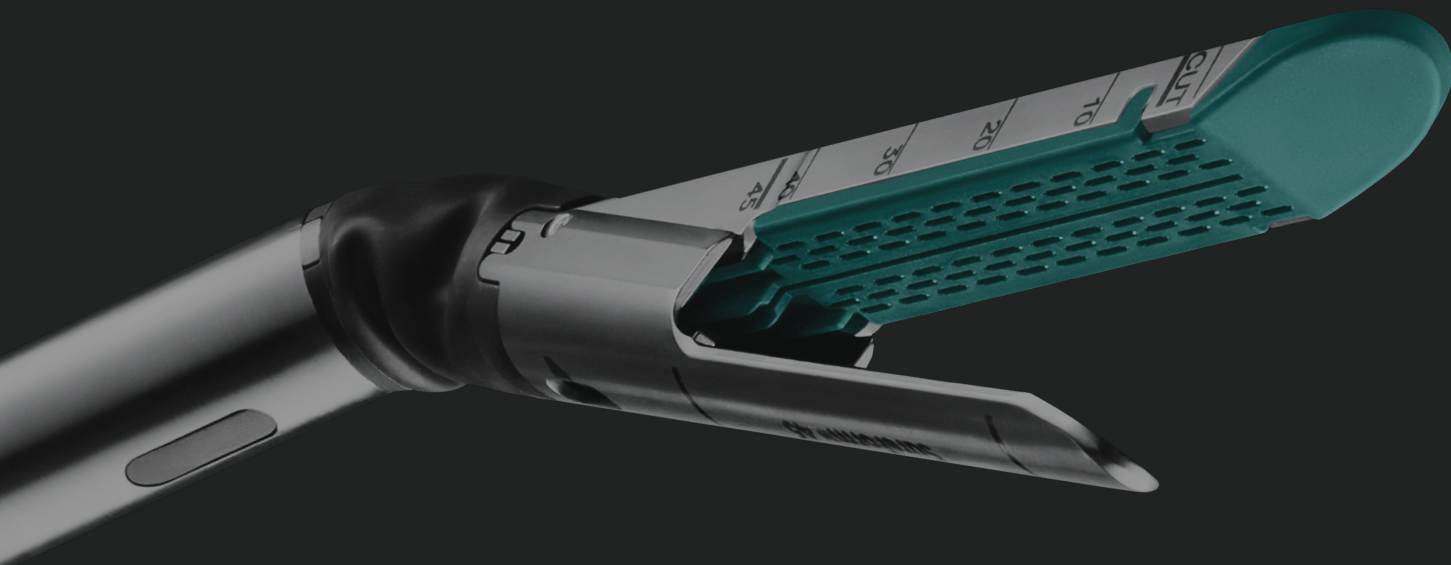

Declaração

Os estudos comparativos citados nesse documento foram realizados em um ambiente de teste ou in vivo ou em um ambiente virtual e não são estatisticamente inflados para mostrar os resultados encontrados. O valor de significância definido para detectar diferenças estatisticamente relevantes foi $p < 0.05$.

Informações de segurança

Complicações sérias podem ocorrer em qualquer cirurgia, inclusive na cirurgia da Vinci e inclusive morte. Exemplos de complicações graves ou com risco de vida, que podem exigir hospitalização e/ou reoperação prolongada e/ou inesperada incluem, mas não estão limitadas a uma ou mais das seguintes: lesão a tecidos/órgãos, sangramento, infecção, aderências internas que podem causar disfunção/dor prolongada.

Riscos específicos à cirurgia minimamente invasiva, inclusive à cirurgia da Vinci, incluem, mas não estão limitados a um ou mais dos que seguem: dor temporária/lesão nervosa associadas ao posicionamento, ao tempo prolongado de operação, à necessidade de converter a uma cirurgia aberta ou à necessidade de incisões maiores ou adicionais. Converter um procedimento pode resultar em um tempo cirúrgico prolongado e tempo prolongado sob anestesia, além de levar ao aumento de complicações. Contraindicações aplicáveis ao uso de instrumentos endoscópicos tradicionais também se aplicam ao uso de todos os instrumentos da Vinci. Para Informações de Segurança Importantes, indicações de uso, riscos, advertências e avisos completos, por favor verifique o endereço www.intuitive.com/safety. Resultados individuais podem depender de um número de fatores incluindo, mas não limitados, a características do paciente, características da doença e/ou experiência do cirurgião.

As cargas dos grampeadores da Intuitive Surgical SureForm™ 60 e Sureform 60, assim como outros acessórios do grampeador, foram desenvolvidos para serem usados com um sistema cirúrgico da Vinci compatível para ressecção, transecção e/ou criação de anastomoses nas especialidades cirúrgicas Geral, Torácica, Ginecológica, Urológica e Pediátrica. Esse dispositivo pode ser usado com uma linha de grampus ou material (natural ou sintético) de sustentação de tecido.

As cargas dos grampeadores da Intuitive Surgical SureForm 45 e Sureform 45, assim como outros acessórios do grampeador, foram desenvolvidos para serem usados com um sistema cirúrgico da Vinci compatível para ressecção, transecção e/ou criação de anastomoses nas especialidades cirúrgicas Geral, Torácica, Ginecológica, Urológica e Pediátrica. Esse dispositivo pode ser usado com uma linha de grampus ou material (natural ou sintético) de sustentação de tecido.

A menos que especificado o contrário, todas as pessoas ilustradas são modelos.

© 2019 Intuitive Surgical, Inc. Todos os direitos reservados. Nomes e marcas de produtos/logos são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Intuitive Surgical e seu respectivo dono. Verificar em www.intuitive.com/trademarks.

PN 1045912-US RevC 06/2019